

新しいハミガキははじめませんか？

Runda Dental NEO

ルンダデンタルネオ

歯周ケアはゴシゴシから
クルクルへ！



ルンダデンタルネオは
抗菌仕様です

3通りの使用方法

歯、歯間の歯垢除去
多密毛で歯垢付着

歯茎マッサージ
唾液腺の刺激

舌清掃
柔らか毛で汚れをとる

3つの特徴

擦らないので歯、歯茎に優しい
柔らか毛で回転するからダメージなし

寿命 約3ヶ月
一般的なブラシの約3倍

歯磨き粉不要
物理的に歯垢を除去するので歯磨剤不要



販売元




株式会社 **クラーク**

TEL. 048-994-1825 FAX. 048-994-1827
〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2

クルクル回転コロコロ転がすと歯垢が取れる



歯と歯茎を一緒に磨けるので、歯頸部の磨き残し無し！
一般的な歯ブラシの様な難しい当て方はありません。

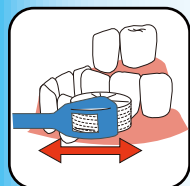

大きな動きでコロコロ転がせばいいので、ハミガキが
苦手な方も簡単に使える！
お子様やご高齢者も楽に使えます。



転がすと自然に歯の間に毛先が届くので、歯間の磨き
残し無し！
咬合面も、もちろん転がすだけでOKです。

誰でも簡単に歯垢が取れる秘密



回転歯ブラシの使い方

※鉄則：必ず転がすことです。擦る様に使うのはNG

臼歯部

- ・3～4歯をコロコロ転がしながら往復。
- ・1ヶ所を5～8往復。
- ・微妙に角度を変えながら行くと尚Good！
- ・歯間にブラシが入っているのを実感しながら転がす。

前歯部

- ・表側は臼歯部同様に大きく、歯頸部に当てて転がす。
- ・裏側は縦にも転がす。

粘膜部

- ・舌、歯茎も気になる口腔内部位をとにかく転がせばOK

回転口腔ケアブラシ Lineup

Runda Dental NEO
ルンダデンタルネオ

レギュラー



ピンク ブルー

スタンダードな
抗菌仕様
ブラシ径15mm
箱包装

ミニ



ピンク ブルー

お子様や女性
向け
ブラシ径12mm
箱包装

Runda Dental
ルンダデンタル

ポータブル



クリア
ピンク クリア
ブルー

持ち運び便利な
折りたたみ式
ブラシ径15.5mm
袋包装

ダブル



クリア
ピンク クリア
ブルー

上級者向け
介護者向け
ブラシ径^{13mm}
+15.5mm
プリスター包装

矯正装置用



クリア
ピンク クリア
ブルー

矯正装置用の
特別配列
ブラシ径15.5mm
箱包装

「ルンダデンタルネオ」
「ルンダデンタル」
特設サイトはこちら

